

Balón semi-complaciente para ACTP Ryurei

Diámetro del balón (mm)	PN (atm/kPa)	PRN (atm/kPa)	D.E. del eje distal (Fr./mm)	D.E. del eje proximal (Fr./mm)	Longitud del balón						Marcador radiopaco
					5mm	10mm	15mm	20mm	30mm	40mm	
1.00	6/608	14/1419	2.4-2.7/0.79-0.89	1.9/0.64	DC-RR1005HH						Sencillo
1.25	6/608	14/1419	2.4-2.7/0.79-0.89	1.9/0.64	DC-RR1205HH	DC-RR1210HH	DC-RR1215HH	DC-RR1220HH			Sencillo
1.50	6/608	14/1419	2.4-2.7/0.79-0.89	1.9/0.64	DC-RR1505HH	DC-RR1510HH	DC-RR1515HH	DC-RR1520HH			Sencillo
2.00	6/608	14/1419	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR2010HHW	DC-RR2015HHW	DC-RR2020HHW	DC-RR2030HHW	DC-RR2040HHW	Doble
2.25	6/608	14/1419	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR2210HHW	DC-RR2215HHW	DC-RR2220HHW			Doble
2.50	6/608	14/1419	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR2510HHW	DC-RR2515HHW	DC-RR2520HHW	DC-RR2530HHW	DC-RR2540HHW	Doble
2.75	6/608	14/1419	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR2710HHW	DC-RR2715HHW	DC-RR2720HHW			Doble
3.00	6/608	14/1419	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR3010HHW	DC-RR3015HHW	DC-RR3020HHW	DC-RR3030HHW	DC-RR3040HHW	Doble
3.25	6/608	12/1216	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR3210HHW	DC-RR3215HHW	DC-RR3220HHW			Doble
3.50	6/608	12/1216	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR3510HHW	DC-RR3515HHW	DC-RR3520HHW	DC-RR3530HHW	DC-RR3540HHW	Doble
3.75	6/608	12/1216	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR3710HHW	DC-RR3715HHW	DC-RR3720HHW			Doble
4.00	6/608	12/1216	2.6/0.87	1.9/0.64		DC-RR4010HHW	DC-RR4015HHW	DC-RR4020HHW			Doble

Relación entre el diámetro del balón y la presión de inflado permisible

Presión	(atm)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	(kPa)	405	507	608	709	811	912	1013	1115	1216	1317	1419	1520	1621	1723
Diámetro del balón (mm)	1.00	0.91	0.96	1.00	1.04	1.07	1.10	1.13	1.15	1.17	1.19	1.21	1.24	1.24	1.29
	1.25	1.19	1.22	1.25	1.28	1.30	1.32	1.33	1.35	1.37	1.39	1.41	1.44	1.45	1.47
	1.50	1.41	1.46	1.50	1.54	1.57	1.60	1.62	1.64	1.66	1.69	1.72	1.75	1.79	1.84
	2.00	1.87	1.95	2.00	2.04	2.08	2.11	2.13	2.15	2.18	2.20	2.23	2.26	2.30	2.33
	2.25	2.16	2.21	2.25	2.29	2.32	2.36	2.39	2.42	2.46	2.49	2.53	2.57	2.62	2.66
	2.50	2.40	2.45	2.50	2.54	2.58	2.62	2.66	2.69	2.74	2.78	2.82	2.87	2.91	2.97
	2.75	2.64	2.70	2.75	2.80	2.84	2.88	2.93	2.97	3.02	3.07	3.12	3.18	3.24	3.31
	3.00	2.89	2.95	3.00	3.05	3.09	3.14	3.18	3.23	3.28	3.33	3.38	3.44	3.50	3.57
	3.25	3.12	3.19	3.25	3.30	3.36	3.41	3.46	3.51	3.57	3.63	3.70	3.77		
	3.50	3.37	3.44	3.50	3.56	3.62	3.67	3.73	3.79	3.86	3.93	4.01	4.09		
	3.75	3.62	3.69	3.75	3.81	3.87	3.93	3.99	4.06	4.13	4.21	4.29	4.38		
	4.00	3.86	3.93	4.00	4.07	4.13	4.19	4.26	4.33	4.41	4.49	4.57	4.67		

NP Presión nominal **RBP** Presión de ruptura nominal (límite superior)

Estructura



Póngase en contacto con su representante local para obtener más información sobre los códigos disponibles en su país.



TERUMO MEDICAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647,
Piso 11 Col. San José Insurgentes
Del. Benito Juárez, C.P. 03900
México, D.F., México
TEL: +52-55-1085-0770
FAX: +52-55-1085-0771

TERUMO CHILE LTDA.
Carmencita 25, Oficina 22,
Edificio Central Park,
Las Condes, C.P 755-0000
Santiago, Chile
TEL: +562-2480-9600
FAX: +562-2480-9608
www.terumochile.cl

TERUMO AMERICAS HOLDING, INC.
2101 Cottontail Lane, Somerset,
New Jersey, 08873 U.S.A.
TEL: +1-732-302-4900
FAX: +1-732-302-3083
Tollfree (USA): +1-800-283-7866
www.terumolatinamerica.com

TERUMO MEDICAL DO BRASIL LTDA.
Praça General Gentil Falcão,
No. 108-9º andar
Cidade Monções -Brooklin Novo
CEP: 04571-150
São Paulo - SP, Brasil
TEL: +55-11-3594-3800
FAX: +55-11-3594-3829
www.terumo.com.br

TERUMO LATIN AMERICA CORPORATION
Doral Corporate Center I
6th Floor 8750 NW 36th Street
Miami, FL 33178 U.S.A.
TEL: +1-305-477-4822
FAX: +1-305-477-4872
www.terumolatinamerica.com

TERUMO COLOMBIA ANDINA S.A.S.
Edificio Bogotá Business Center
Calle 103,
No.14A-53, Oficina 307
Bogotá, D.C., Colombia
TEL/FAX: +57-1256-8400

Aviso de Publicidad
No. 193501202C0543

Registro Sanitario
No. 0848C2018 SSA

Para uso exclusivo de
Profesionales de la Salud



Permite que cada caso progrese sin complicaciones

Ryurei™

Catéter de dilatación para ACTP

Asumimos el reto de lesiones complejas


Aspiramos a lograr el equilibrio perfecto—una tradición de catéteres de dilatación de Terumo. Navega el vaso hacia la lesión objetivo de forma suave y poderosa. Su socio en procedimientos de ACTP bajo una variedad de condiciones terapéuticas.

Ryurei fue desarrollado para crear "un balón que pueda soportar el procedimiento bajo cualquier condición terapéutica". Ryurei logra una facilidad de navegabilidad y una poderosa capacidad de cruce en lesiones complejas al usar un material flexible para la punta y adoptar una estructura de alambre al centro del sistema. Además, la línea de productos incluye un sistema con un balón de 1.0mm, el menor diámetro posible. Ryurei, con su amplia gama de balones y su alta efectividad, es ideal para los procedimientos de ACTP en una gran variedad de casos.

Punta

- Perfil pequeño de entrada de 0.41mm

Al igual que Tazuna, la punta está fabricada con material flexible.

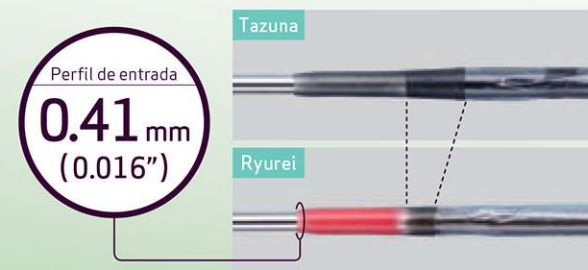

Balón

- 1.00 mm— el diámetro más pequeño* para un balón

Cuenta con un balón de 1.00 mm de diámetro lo que facilita la manipulación en lesiones con estenosis severa.

*Entre los catéteres de dilatación de Terumo (a partir de febrero de 2018)

- Estructura re-envolvente

Tres pliegues
Diámetro 2.25-4.00 mm



Eje

- Estructura de alambre central

La estructura de corte en espiral convencional utilizada desde el extremo proximal a la punta del eje en balones pre-existentes fue rediseñada y cambió a una estructura de alambre central.

