



Terumo Interventional Systems está **comprometido al éxito** en sus intervenciones a través de soluciones innovadoras y soporte continuo.

PUSHING BOUNDARIES

Buscamos nuevas alternativas a soluciones efectivas que le ayuden a **mejorar el resultado de sus pacientes.**



Destination®

Guiding Sheath

INTRODUCTORES GUÍA DESTINATION®

Se empaqa 1 por caja e incluye dilatador. Todos los dilatadores son compatibles con guías 0.038”.

Diámetro interno FR	Número de referencia	Longitud	Longitud del revestimiento hidrofílico	Curva distal	Válvula
5FR 	54-54501	45 cm	35 cm	Recta	CCV
	54-54502	45 cm	5 cm	Hockey stick	CCV
	54-54503	45 cm	5 cm	Multipropósito	CCV
	54-54504	45 cm	5 cm	RDC	CCV
6FR 	RSR01	45 cm	5 cm	Recta	CCV
	RSR02	45 cm	5 cm	Hockey stick	CCV
	RSR03	45 cm	5 cm	Multipropósito	CCV
	RSR13	45 cm	5 cm	RDC	CCV
	RSR14	45 cm	5 cm	LIMA	CCV
	RSP07	45 cm	5 cm	Recta	TBV
	RSC05	90 cm	15 cm	Recta	CCV
	RSC07	90 cm	15 cm	Multipropósito	CCV
	RSP03	65 cm	35 cm	Recta	TBV
	RSP01	65 cm	35 cm	Recta	CCV
7FR 	RSR04	45 cm	5 cm	Recta	CCV
	RSR05	45 cm	5 cm	Hockey stick	CCV
	RSR06	45 cm	5 cm	Multipropósito	CCV
	RSR15	45 cm	5 cm	RDC	CCV
	RSR16	45 cm	5 cm	LIMA	CCV
	RSP02	65 cm	35 cm	Recta	CCV
	54-74501	45 cm	35 cm	Recta	CCV
	54-84501	45 cm	35 cm	Recta	CCV
8FR 	54-84506	45 cm	35 cm	Recta	TBV
	54-89001	90 cm	60 cm	Recta	CCV
	54-89006	90 cm	60 cm	Recta	TBV

RDC: Doble Curva Renal - LIMA: Arteria mamaria interna izquierda - CCV: Válvula de corte transversal - TBV: Válvula Tuohy-Borst
1. Datos en archivo. Terumo Medical Corporation.

Destination®

Guiding Sheath



GUIANDO SUS INTERVENCIONES A TRAVÉS DE UN SOPORTE CONSISTENTE



Terumo Corporation
2-44-1 Hatagaya
Shibuya-ku Tokyo 151-0072
Japan
Tel.: +81 3 3374 8111
www.terumo.com

Terumo Medical Corporation
Corporate Office
265 Davidson Avenue
Somerset, NJ 08873 USA
Tel.: +1 732.302.4900
www.terumomedical.com

Terumo Latin America Corporation
Doral Corporate Center I, 6th Floor
8750 NW 36th Street, Miami FL 33178
U.S.A.
Tel.: +1-305-477-4822
www.terumolatinamerica.com

Terumo Interventional Systems
www.terumo.is.com

Terumo Medical de Mexico S.A. de C.V.
Av. Insurgentes Sur 1647, Piso 11,
Col. San José Insurgentes Del. Benito Juárez,
C.P. 03900 Ciudad de México, México
Tel.: +52 55 1085 0770
www.terumomexico.com

Aviso de Publicidad No. 223300202C8248
Registro Sanitario No. 0571C2020 SSA / 0566C2020 SSA
Exclusivo para Profesional de la Salud



SUAVE TRANSICIÓN QUE PERMITE UNA FÁCIL PENETRACIÓN

Punta atraumática


- Minimiza el daño potencial al vaso

Transiciones suaves

- Entre guía-dilatador-camisa

Proporciona acceso a las lesiones

- Excepcional navegabilidad, incluso en anatomía tortuosa

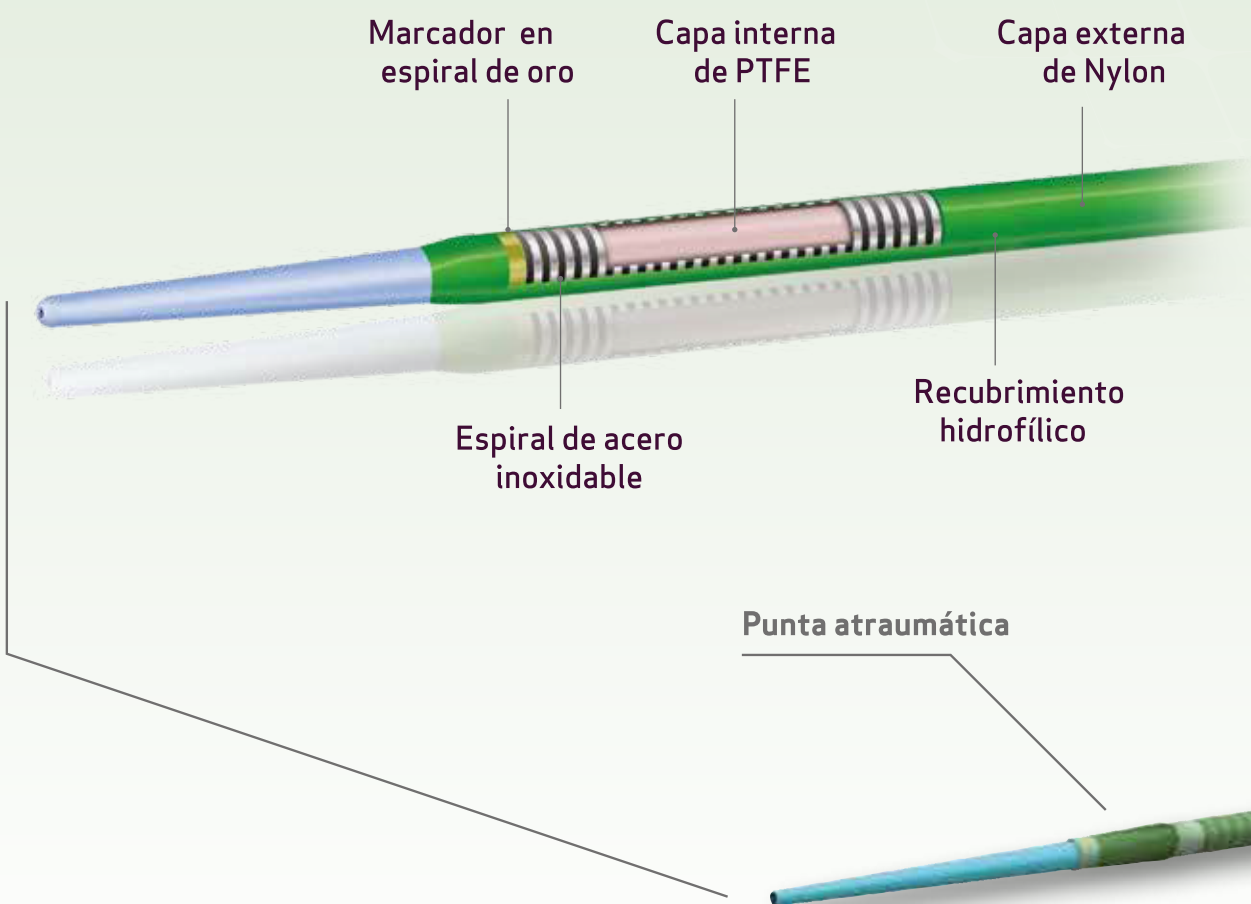

Datos en archivo.

DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS PARA SUPERAR SUS DESAFÍOS PERIFÉRICOS

Mantiene la forma y la posición

- Durabilidad excepcional, incluso en intervenciones largas

Mejora la visualización para un posicionamiento preciso

- Triple radiopacidad (camisa, dilatador y marcador en espiral de oro)


Resistente a la torsión

- Espiral de acero inoxidable para un soporte constante


Proporciona un movimiento suave

- Espiral reforzada con recubrimiento interno de PTFE que minimiza la fricción


Opción de válvula desmontable

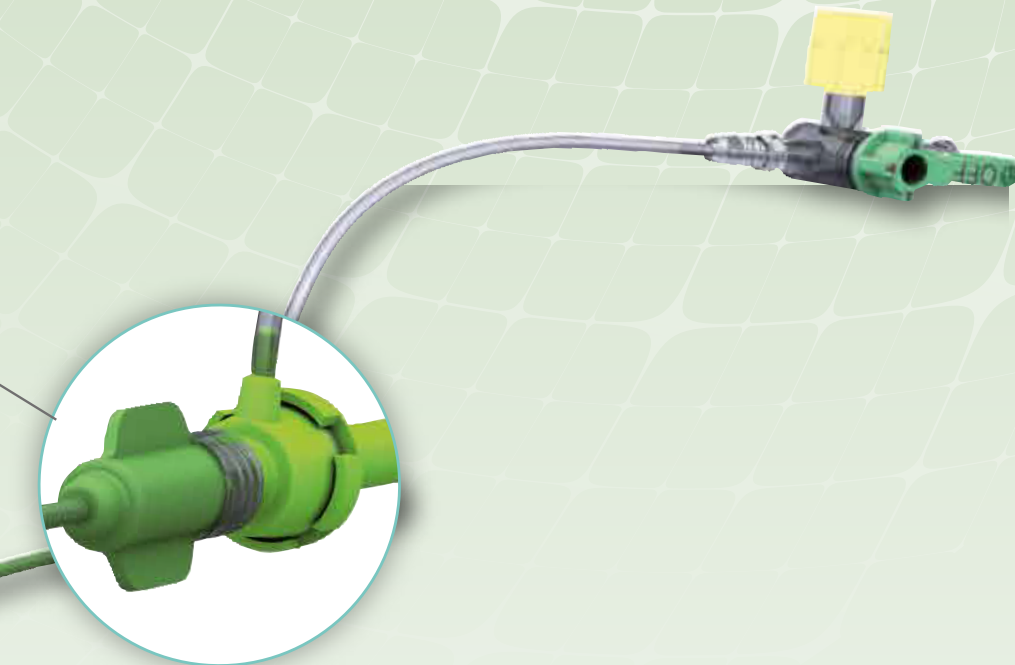

Válvula hemostática Cross Cut™ (CVV)

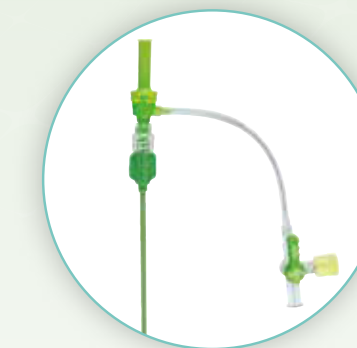

Válvula Tuohy-Borst (TBV)

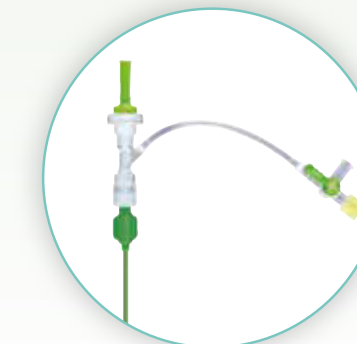

Se adapta a las variaciones anatómicas en el acceso a los vasos

- Recta
- Hockey stick
- Multipropósito
- Doble Curva Renal (RDC)
- Arteria Mamaria Interna Izquierda (LIMA)

Diseñado para trabajar con

NaviCross® and **Glidewire Advantage®**
Support Catheter Peripheral Guidewires

Datos en archivo

Datos en archivo